


HandiHaler

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende techniek om longaandoeningen te behandelen. Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie. Volg zorgvuldig volgende aanbevelingen op om zo veel mogelijk geneesmiddel op de juiste plaats in de longen te krijgen.

Inhalatie-instructies


1

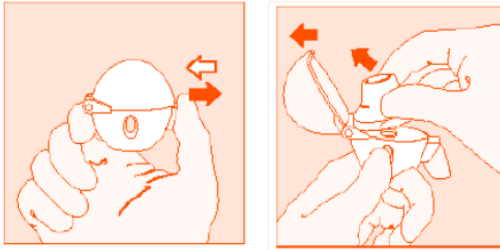


Klap de beschermkap open door op de groene knop te drukken. **Open ook het mondstuk.**

2

Haal een capsule uit de verpakking en **plaats deze in de opening**. Het maakt niet uit welke kant je eerst in de opening plaatst.

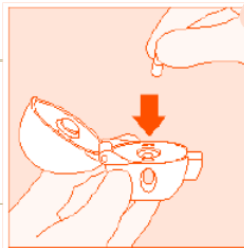

3

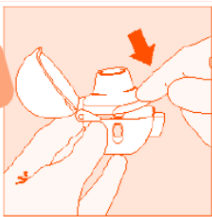

Sluit het mondstuk goed totdat je een klik hoort. Laat de beschermkap open.

4

Hou de HandiHaler® **rechttop**, met het mondstuk naar boven gericht.

5

Druk de groene knop in één keer helemaal in. Laat de knop vervolgens weer los.

Hierdoor worden er gaatjes in de capsule geprikt en kan je het poeder inhaleren. Het is belangrijk de knop volledig in te drukken. Zoniet is er een minder goede doorboring van de capsule.




6

Adem volledig uit, weg van het toestel. Zo vermijd je dat de binnenkant van het toestel vochtig wordt en dat je het poeder wegblaast.

7

Als je volledig uitgeademd hebt, neem dan een rechte houding aan en buig het hoofd licht achterover. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen rond het mondstuk.


Doordat de luchtwegen dan zo recht mogelijk zijn, vermindert de hoeveelheid geneesmiddel dat aan de keel blijft kleven.

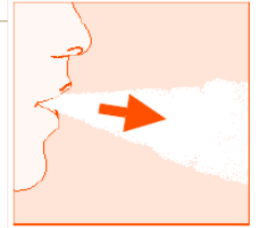

8

Adem zo krachtig en zo diep mogelijk in. Let erop niet langs de neus in te ademen.

Tijdens het inademen hoor je een zoemend geluid. Dit is de capsule die rond haar as draait en is nodig om het poeder uit de capsule te zuigen.

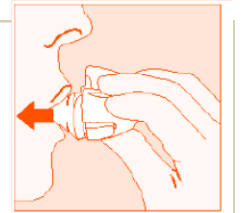

9

Haal de inhalator uit de mond. **Hou de adem 5 à 10 tellen in** en adem daarna rustig uit.

10

Herhaal nogmaals stap 6 tot 9. *Hierdoor ben je zeker dat de volledige dosis geïn haleerd is.*

11

Open opnieuw het mondstuk en tik de lege capsule eruit. Als je merkt dat de capsule niet volledig leeg is, dan plaats je de capsule terug en herhaal je nog eens stap 6 tot 9.

12

Sluit het mondstuk en de beschermkap. *Zodat bij een volgend gebruik geen stof wordt ingeademd.*

13

Spoel je mond met water.

Zo blijft er geen geneesmiddel in de mond achter. Dit voorkomt bijwerkingen zoals een droge mond.

Opmerkingen:

- Adem nooit uit in de HandiHaler®
- Slik de capsules niet in!
- Neem enkel de capsule uit de blister die je nodig hebt. Bewaar de andere capsules in de blisterverpakking.
- Gebruik steeds het nieuwe toestel wanneer je een nieuw doosje begint.
- Bewaar de HandiHaler® en de capsules op een droge en koele plaats.

Stempel van de apotheek